

# Face Lift

Wash your face.  
Put on face lotion.  
Pat with Face Lift.  
Get a fine skin.


Face Lift has a beautiful spatula-shaped applicator, which fits your fine curves on your face, enabling more effective treatment. It works especially well with facial creams and gels, making them double-effective. Also its built-in timer helps when Face Lift is operated on your skin for a certain period of time, or you leave it without switching it off.

ELAICE

## Face Lift フェイスリフト

フェイスリフト・トリートメントのプロがデザイン。スパチュラ形状の先端のアプリケータにより顔の曲線の細部までトリートメントすることを可能に。洗顔後に5～6分、心地良い振動を楽しむだけで、ピンとした肌に。気になるフェイスライン・頬や目元を簡単ケア。毎日のお肌ケアにオススメです。

- どこでも使える軽量&コンパクトサイズ
- 単3乾電池1本(別売)で省エネトリートメント
- 普段お使いのクリームや美容液と共にご使用可能
- 簡易タイマー機能付き(約5分)

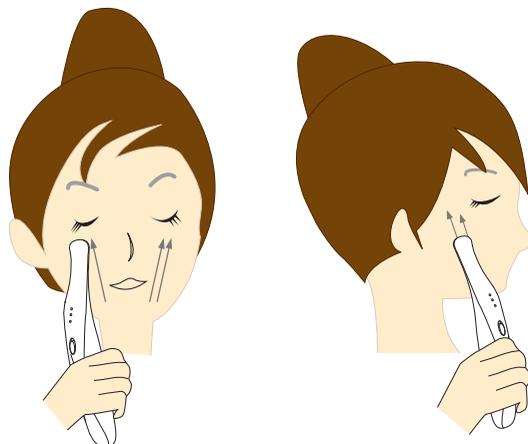

### ⚠危険


下記の医療用電子機器をご使用の方は、絶対に使用しないでください。

- ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- 人工心臓などの生命維持用電子医療機器
- 心電計などの装着型医療用電子機器

### 【使用上の注意】

- ▶ 身体に異常を感じたらすぐに使用を中止してください。
- ▶ 傷・炎症など、皮膚疾患のある場所や骨の上、粘膜には使用しないでください。
- ▶ コンタクトレンズを着用したままでの使用はしないでください。
- ▶ ご使用開始前に、本体に傷や変形などが無いかを確認してください。
- ▶ お子様の手の届かない所に保管してください。
- ▶ 使用中・使用後に赤み、はれ、かゆみ等の異常が出た場合は、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。

電源：単3乾電池×1本(別売)  
サイズ：W200×L28.5×H28.5(mm)  
重量：59g 材質：ABS

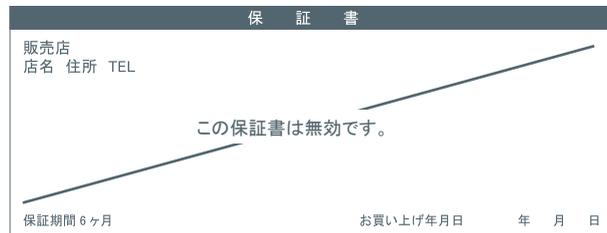

保証規定は台紙の折込部分に記載




ELAICE 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6  
エリス株式会社 TEL: 0120-607-706 www.elaice.jp Made in China

### 各部名称



### 使用方法

- ①電池ケースカバーを図のようにスライドさせて開けます。
  - ②電池の+-を表示とおり合わせセットし、しっかりと閉めます。
  - ③電池をセット後、スイッチをアプリケータの方向へスライドさせてONにします。
- ※クレンジング、洗顔で化粧や肌の汚れを落とした後に使用してください。

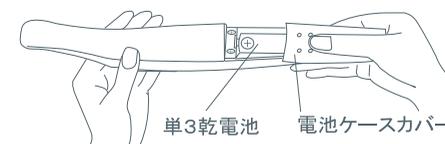

### 【取扱い上の注意】

- ▶ 浴室や湿度の高い場所や、入浴しながらの使用はしないでください。
- ▶ 日の当たらない、湿度の低い場所に保管してください。
- ▶ 長時間使用しない場合は、電池を外してから保管してください。
- ▶ 本体を分解・修理・改造しないでください。

### トリートメント・ゾーン



### 保証規定

- 1 保証期間内に正常な状態で使用していて故障した場合には、本保証書記載内容に基づき無料修理致します。
- 2 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
  - ① 本保証書をご提示されない場合
  - ② 本保証書の所定事項の未記入文字を書き換えられたもの、販売店の表示/印がない場合
  - ③ 本保証書と製品貼付ラベルの内容が一致しない場合
  - ④ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び破損
  - ⑤ 火災、地震、水害、公害、指定以外の仕様電源、その他の天変地異による故障及び損傷
  - ⑥ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 3 修理はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書をご提示のうえ依頼ください。
- 4 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 5 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 6 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 7 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 

※通信販売等でご購入の場合など、販売店印のない場合は、お買い上げ票などのご購入日が明確なものを一緒に保管しておき、修理のご依頼の際には保証書に添付してください。